


粒度分布

Nikkabright FEN-A H/C

Shimadzu SALD-2300(WingSALD II:Version 3.4.4) フローセル

ファイル名	Nikkabright FEN-A H/C			----	----
サンプルID	----	サンプルNo.	----	----	----
メディアン径	0.837	平均径	0.878	吸光度	0.083
モード径	0.680	標準偏差	0.262	----	----

10.000 %径	20.000 %径	50.000 %径	80.000 %径	90.000 %径	0.000 %径	0.000 %径	0.000 %径	0.000 %径
0.405	0.495	0.837	1.546	2.064	0.000	0.000	0.000	0.000

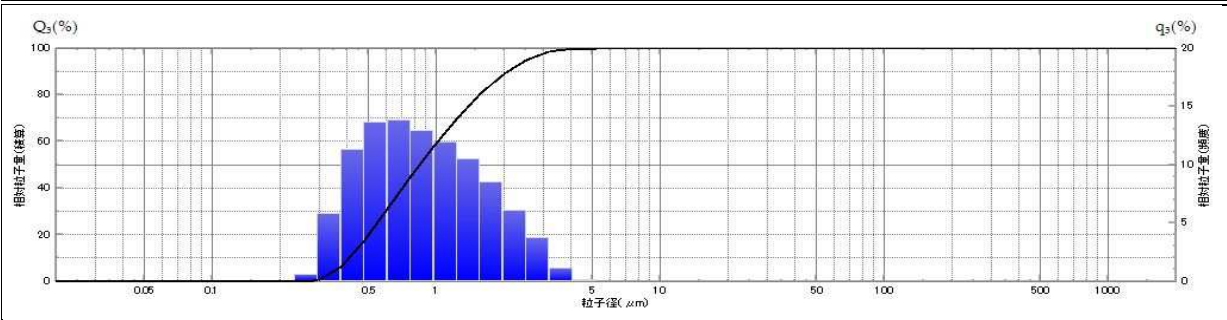

粒子径 x(μm)	積算% Q3(%)	頻度% q3(%)	14	粒子径 x(μm)	積算% Q3(%)	頻度% q3(%)	27	粒子径 x(μm)	積算% Q3(%)	頻度% q3(%)	40	粒子径 x(μm)	積算% Q3(%)	頻度% q3(%)
2500.000	100.000	0.000	14	113.342	100.000	0.000	27	5.139	100.000	0.090	40	0.233	0.000	0.000
1970.562	100.000	0.000	15	89.339	100.000	0.000	28	4.050	99.910	1.108	41	0.184	0.000	0.000
1553.246	100.000	0.000	16	70.419	100.000	0.000	29	3.193	98.802	3.707	42	0.145	0.000	0.000
1224.308	100.000	0.000	17	55.506	100.000	0.000	30	2.516	95.095	6.113	43	0.114	0.000	0.000
965.030	100.000	0.000	18	43.752	100.000	0.000	31	1.984	88.982	8.477	44	0.090	0.000	0.000
760.661	100.000	0.000	19	34.486	100.000	0.000	32	1.563	80.505	10.511	45	0.071	0.000	0.000
599.572	100.000	0.000	20	27.183	100.000	0.000	33	1.232	69.994	11.909	46	0.056	0.000	0.000
472.597	100.000	0.000	21	21.426	100.000	0.000	34	0.971	58.085	12.953	47	0.044	0.000	0.000
372.513	100.000	0.000	22	16.889	100.000	0.000	35	0.766	45.132	13.789	48	0.035	0.000	0.000
293.624	100.000	0.000	23	13.312	100.000	0.000	36	0.604	31.343	13.666	49	0.027	0.000	0.000
231.442	100.000	0.000	24	10.493	100.000	0.000	37	0.476	17.677	11.268	50	0.022	0.000	0.000
182.428	100.000	0.000	25	8.271	100.000	0.000	38	0.375	6.408	5.835	51	0.017	0.000	0.000
143.794	100.000	0.000	26	6.519	100.000	0.000	39	0.296	0.573	0.573				

条件ファイル名	----	変換テーブル	なし
屈折率	2.00-0.20i	計算モード	標準モード
平均回数	128	測定回数	1
評価対象粒子径範囲	OFF	測定間隔	2
分散溶媒	----	センサ評価開始位置	1
分散剤濃度	----	微小角散乱光センサフィルタ	無効
ポンプスピード	5	分散剤	----
試料調整方法	----	分散方法	----
分布基準	体積	内蔵超音波照射時間	10
分布関数	無変換	シーケンス名	----
	積算分布	フルイ下	頻度分布
		スムージング	0
		データシフト	0